


Instron 59 系列电子万能试验机软件使用方法

1. 打开试验机电源（在试验机基座侧面）和控制电脑电源。
2. 打开试验机控制软件




3. 打开实验方法，如果已有实验方法则选择“测试”

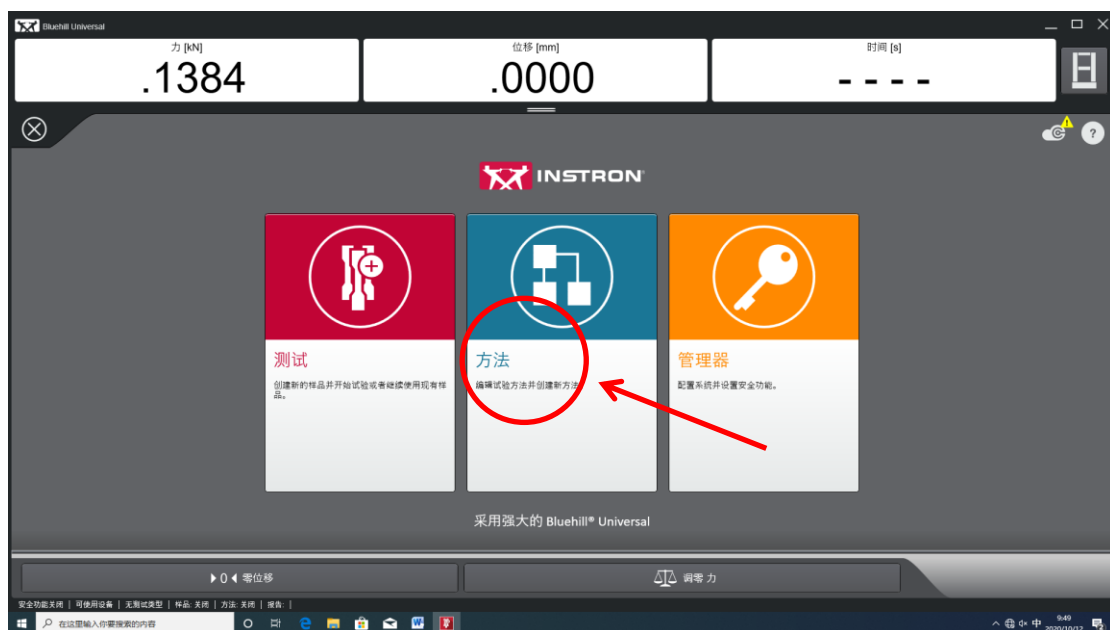


3. 设置实验方法，可以选择“新方法”中的所需模板，或选择“编

辑方法”中的模板进行编辑。比如选择“新方法”中的“金属方法”

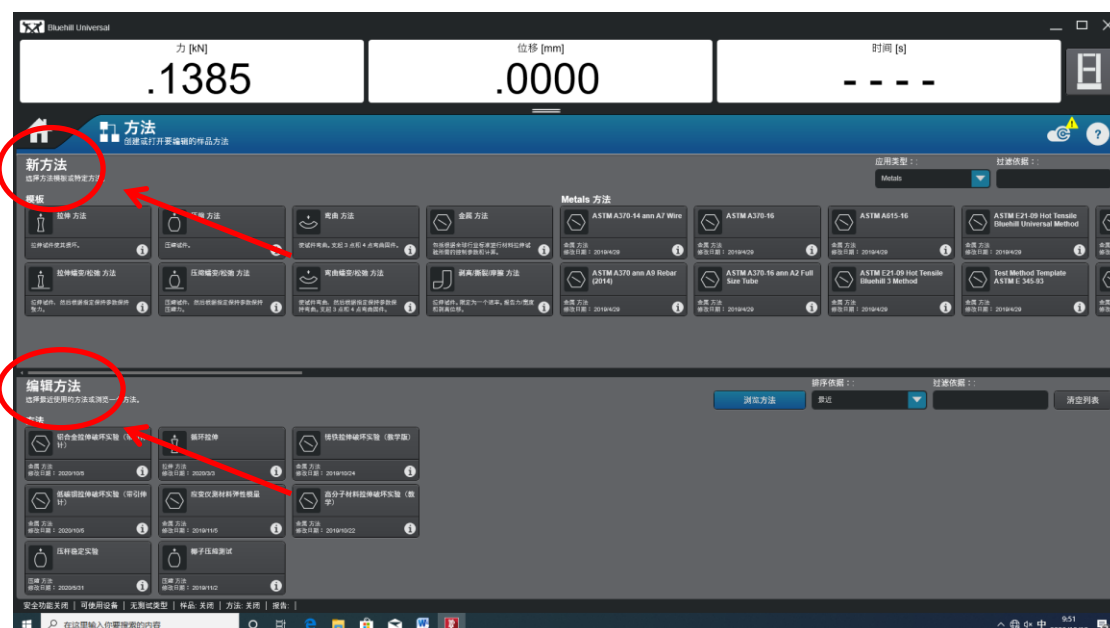


4. 其中“常规”/“样品”/“试样”根据需要进行设定，如无特殊要求不用设定“测量”和“计算”。点击“测试控制”进行试验条件设定。

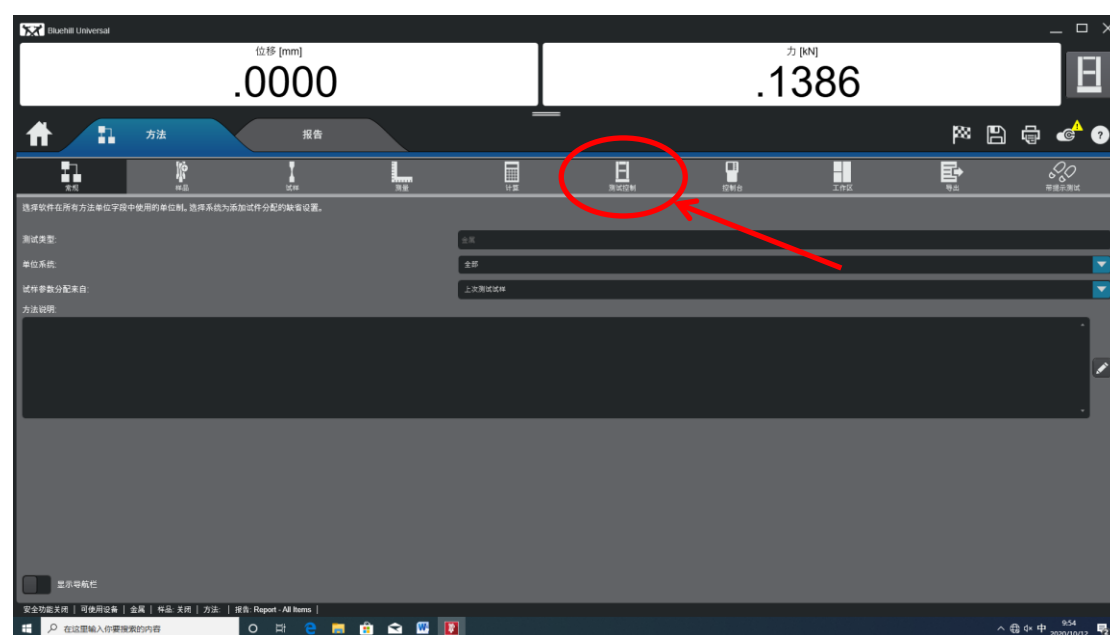


5. 如无特殊要求不用设定左侧的“开始测试”/“应变”/“测试前”。


选择左侧的“测试”。

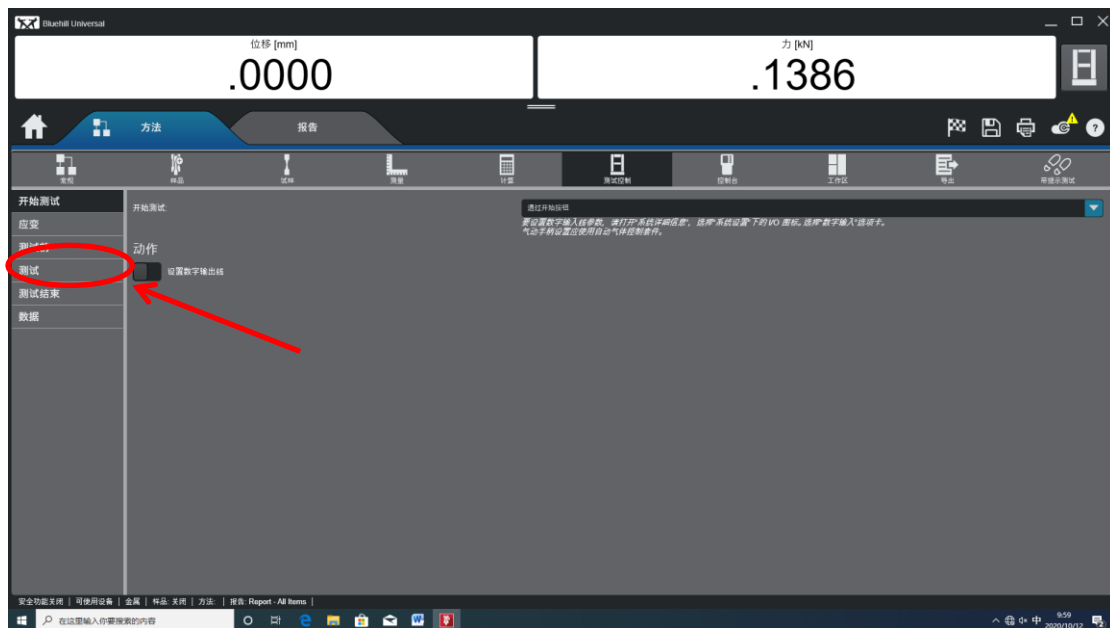


6. 根据试验要求设计试验测试速度。

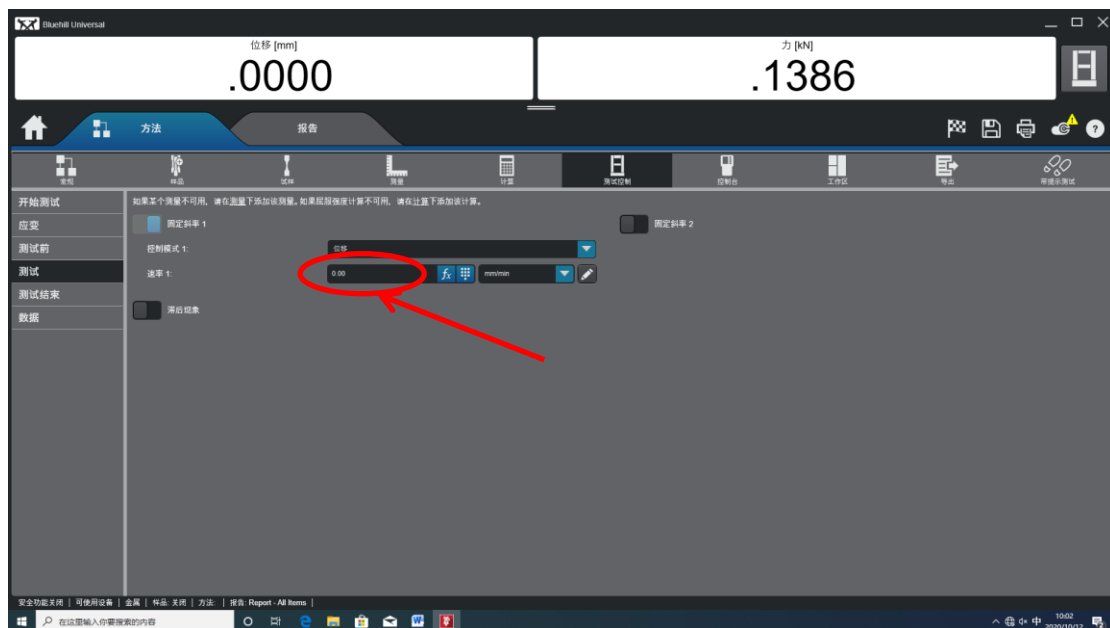


7. 设定测试结束条件。

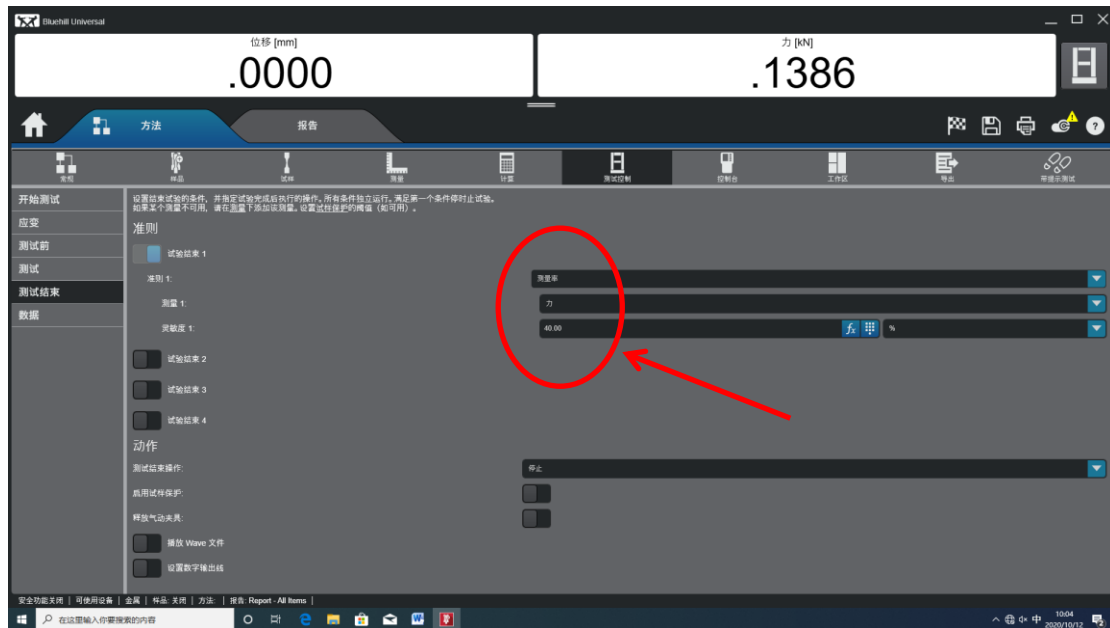


8. 设定试验结果导出文件，

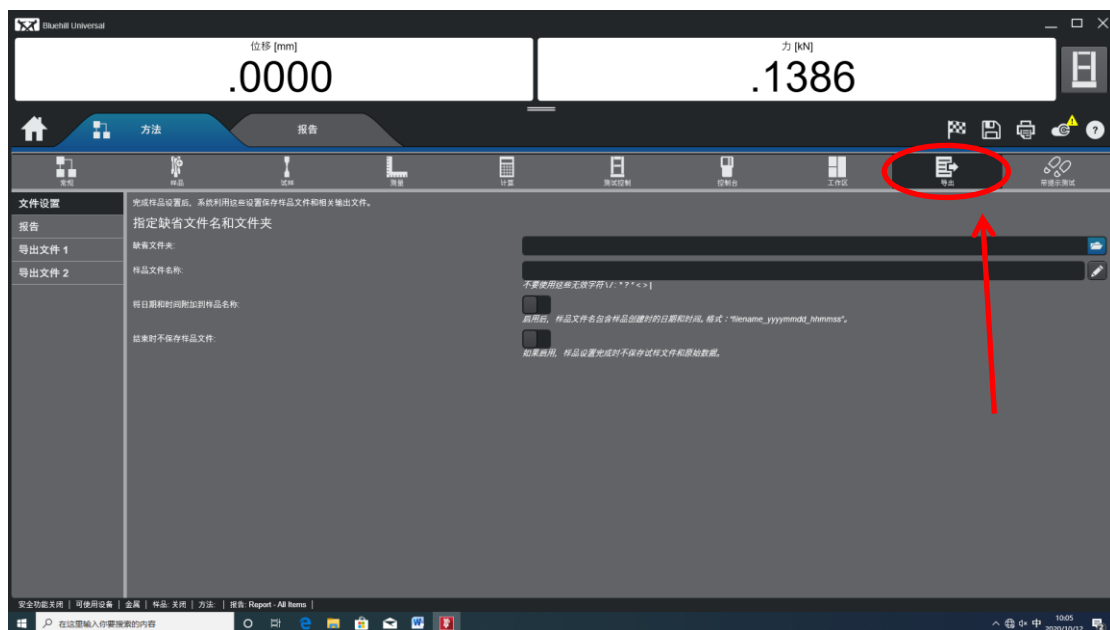


9. 设置导出文件格式，选择“导出文件 1”，然后将“原始数据”选项勾选。

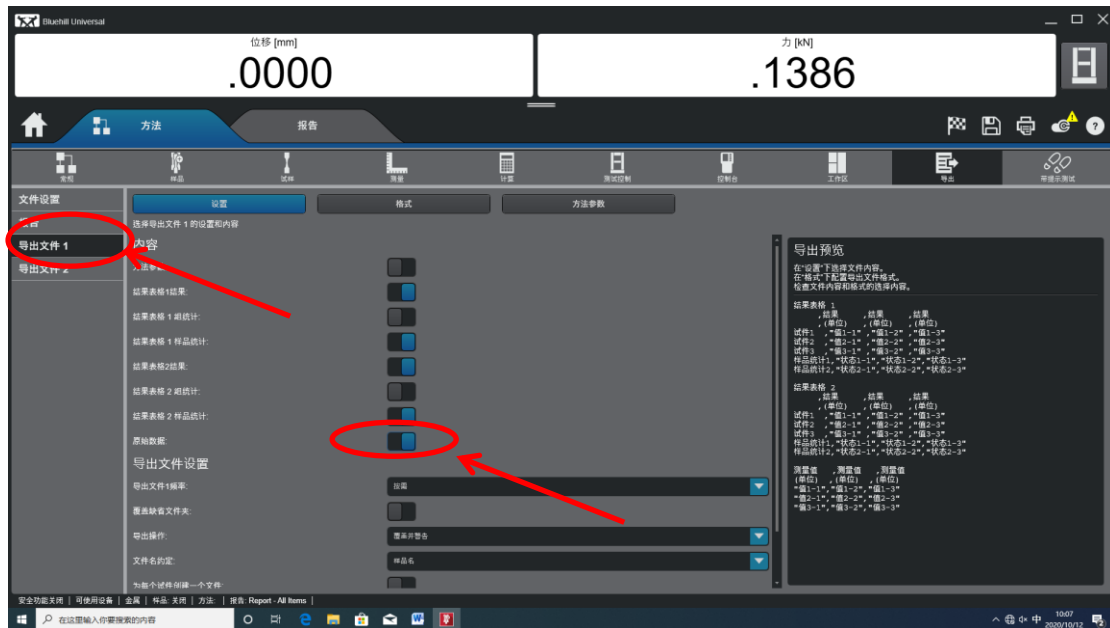


10. 保存试验测试方法，把鼠标箭头放置在“存储”图标位置点击右键，选择“方法另存为”，将试验方法取个名字保存。

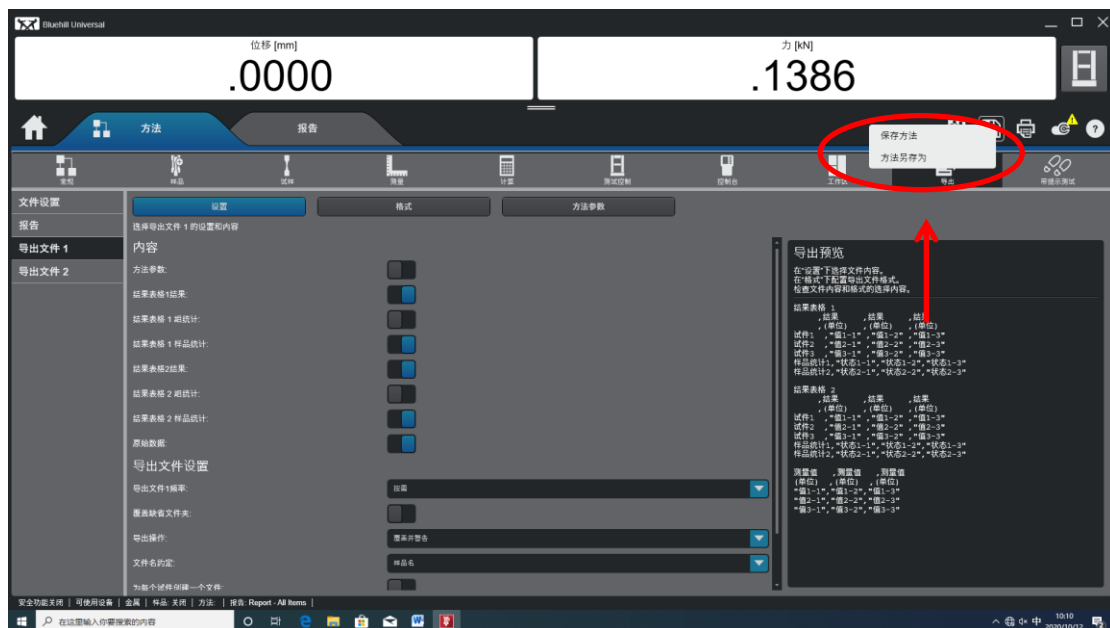


11. 方法保存完成后，点击左上角主页。

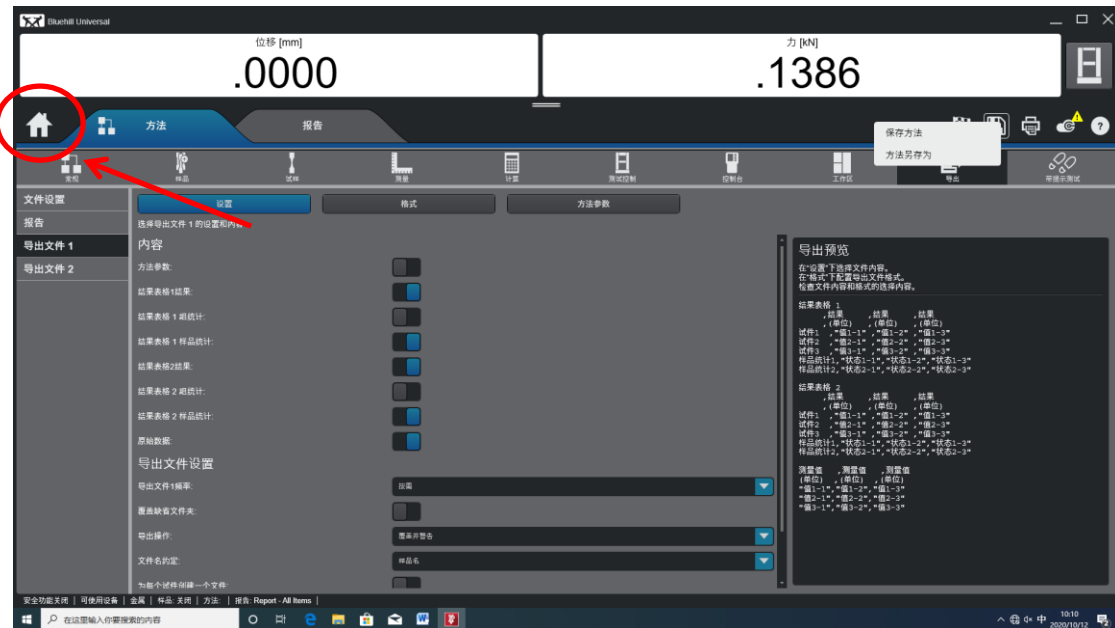

12. 选择测试图标，进入已有测试方法选择。

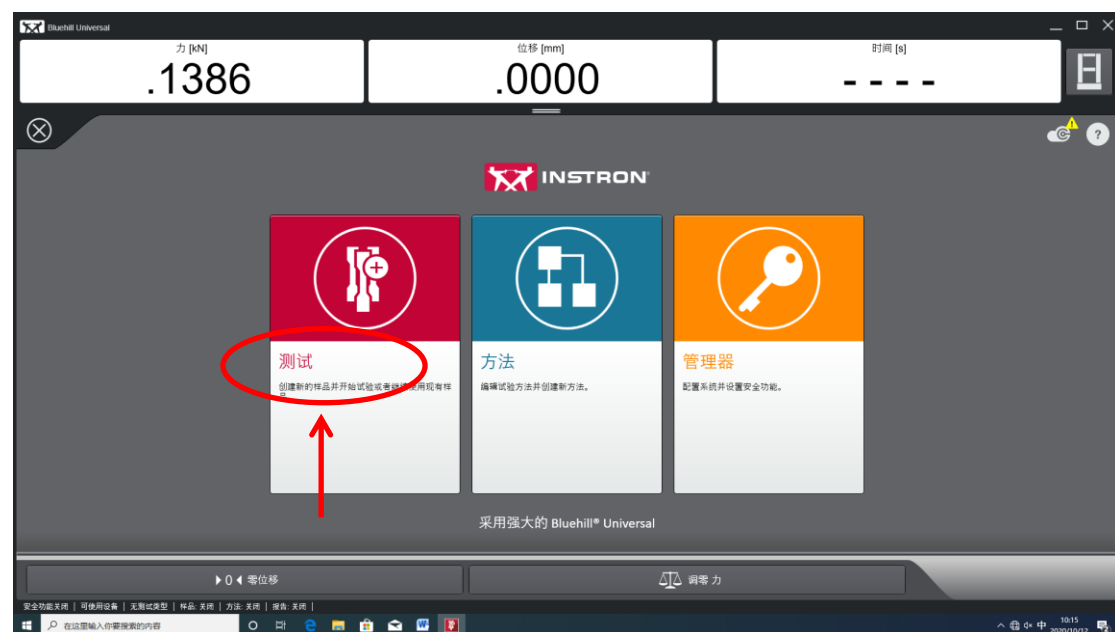

13. 在选择测试程序页面，选择刚才存储的测试程序。

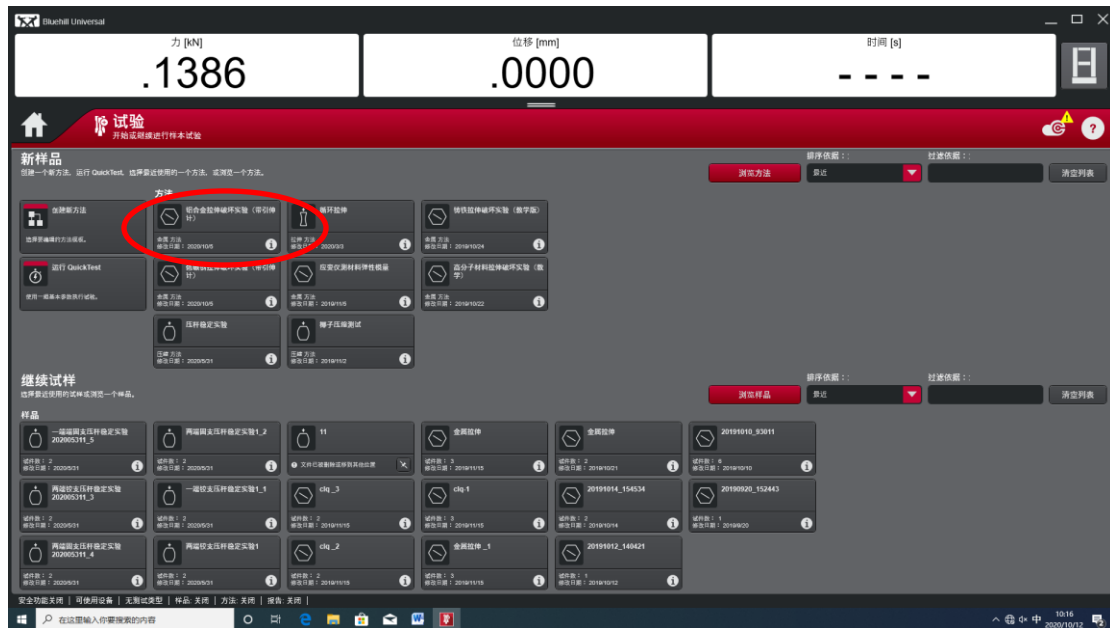

14. 进入试验界面，调整好试验机横梁位置并装配好试样后，可以将鼠标箭头放置在位移显示栏点击鼠标右键，对横向位移归零。力值显示不能归零，如果很大，通过试验机控制器的“手轮”进行卸载。设置完成后点击右下角的“开始”。



15. 试验结束后保存数据，将鼠标箭头放置在“导出选项”，并点击鼠标右键，选择“导出**.CSV”,保存到指定位置后，利用实验室公

用存储盘拷贝到公用电脑，再拷贝到私人存储盘中。

